

REVOLUCIONARIO



Inyector sin Aguajas ... para Comodidad del Paciente

Clínicamente probado para reducir el miedo y el trauma asociados con inyecciones con aguja y jeringa

... ¿Qué es el MadaJet?

- Un dispositivo portátil para inyectar medicamentos sin aguja ni jeringa.
- Crea una fina corriente en chorro que penetra la piel y es prácticamente INDOLORA.




- Para uso con anestésicos, esteroides y varios otros medicamentos
- Produce niveles más altos de anestesia tisular usando menos volúmenes
- Minimiza el traumatismo tisular alrededor del lugar de la inyección.
- Se puede esterilizar en autoclave.
- 1 año de garantía



Ventajas fisiológicas:

MadaJet no es un dispositivo de inyección tópica. Cada inyección administra un volumen de **0.1 cc**, a una profundidad de **4.5 - 5 mm** por debajo del epitelio. En la base de cada infiltración se forma un enrojecimiento que mide aproximadamente **5 - 6 mm** de diámetro. Así, cada inyección en el tejido forma un cono invertido como se muestra en el diagrama a la derecha.

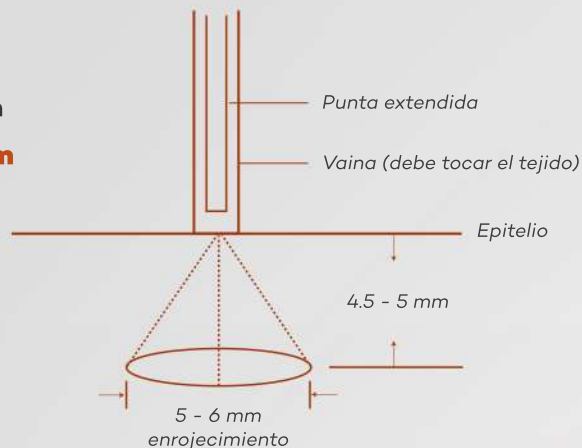

Producto # 401UR Incluye:

- (a) MadaJet ensamblado
- (b) Estuche de transporte personalizado
- (c) Soporte
- (d) Estilete
- (e) Llave inglesa
- (f) Punta Extendida Tip® adicional de 3/4" con funda de acero inoxidable
- (g) Dos cámaras de llenado Pyrex adicionales
- (h) MadaCide-FD Desinfectante / limpiador
- (+) Juego de dedos (NOT DISPLAYED)

Materiales de apoyo:

- Nueva técnica para realizar entregas rápidas inicio de anestesia local profunda para pacientes sometidos a vasectomía

CHORRO SIN AGUJA TÉCNICA ANESTÉSICA PARA VASECTOMÍA SIN BISTURÍ

Ronald S. Weiss, M.D.
Philip S. Li, M.D.

- Disminuye el miedo al dolor y aumenta la popularidad de la vasectomía


- Alta satisfacción del paciente, como se refleja en bajas puntuaciones de dolor

- Punta única de acero inoxidable que cabe sobre el conductos deferentes

ANESTESIA SIN AGUJAS PARA VASECTOMÍA SIN BISTURÍ:

Una guía instructiva para los cirujanos

Ronald S. Weiss, M.D.
Philip S. Li, M.D.

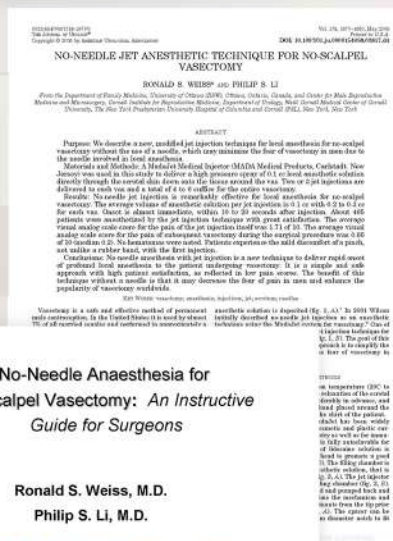

Copyright © 2011

The Weiss Clinic, Ottawa, Canada